



TRITON 3-M est une table de traction à 3 sections multifonctionnelles qui, associée à une unité de traction motorisée, rend le traitement de traction vertébrale facile et efficace.

La traction est utilisée depuis des années dans le traitement par décompression, les contractures musculaires aiguës et les rachialgies d'origine discale.


L'étirement de la colonne réduit la pression sur le disque intervertébral, détend les muscles environnants, soulage la compression et l'irritation de la racine du nerf et améliore la circulation locale.

Les plans inclinables et mobiles de la TRITON 3-M évitent les frottements sous les hanches et les jambes, permettant d'appliquer la force de traction vertébrale maximale pendant le traitement. De plus, les sections peuvent être verrouillées et la hauteur de la table est variable, ce qui en fait un outil de traitement idéal et personnalisé.

La table de traction vertébrale Galaxy TRITON 3-M est disponible en deux versions de châssis :

- cadre FO avec deux pieds et deux roues
- cadre F4 avec quatre pieds et quatre roues multidirectionnelles, rétractables pour un transport facilité.

L'unité de traction motorisée et l'appareil de traction cervicale sont vendus séparément.

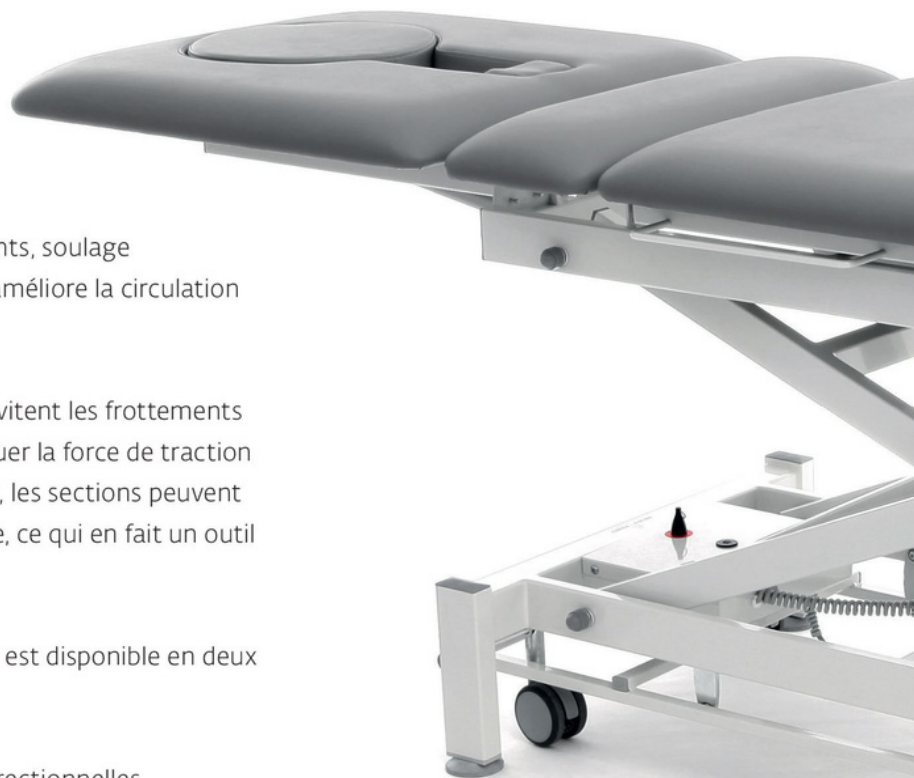

Caractéristiques

- Confort maximal en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles et de traction.
- Surface mobile empêchant le frottement sous les hanches et les jambes.
- Proclive de la tête jusqu'à 85°.
- Proclive/déclive assistées à gaz pour faciliter le positionnement.
- Cadre de commande électrique périphérique pour élever ou abaisser la table, facilitant les manipulations.

Système de ceinture universelle Deluxe pour traction lombaire (1410)



Dispositif pour traction cervicale Saunders (7040)



Système de traction TRU-TRAC® avec écran tactile monochromatique pivotant (4779)

Appareil de Traction TRITON® avec écran tactile numérique couleur pivotant (4749)



Tabouret de traction (3565)

NUANCIER DE COULEURS



Ecu
(x = 00)



Beige
(x = 01)



Bleu
(x = 02)



Bleu Marine
(x = 03)



Terra Cotta
(x = 04)



Chocolat
(x = 05)



Gris
(x = 06)



Gris Graphite
(x = 07)



Noir
(x = 08)

Information de commande

Code Article	Description Produit
3263	Table TRITON 3-M Cadre FO avec deux pieds et deux roues
3264	Table TRITON 3-M cadre F4 avec quatre pieds et quatre roues multidirectionnelles et rétractables

Accessoires en option

3565	Tabouret de traction
1410	Système de ceinture universelle Deluxe
7040	Dispositif pour traction cervicale Saunders
4779	Appareil de traction TRU-TRAC®
4749	Appareil de traction TRITON®

Spécifications Techniques

Alimentation	230 V~ 50/60 Hz, 120 V~ 50/60 Hz	
Intensité de courant	1A max avec 230V, 2A max avec 120V	
Dimensions	Total:	L 211 cm x l 64 cm
	Section tête/dos :	72 cm inclinaison 0 - 85°
	Section médiane :	20 cm
	Plateau jambier :	119 cm
	Elévation minimum :	57 cm
	Elévation maximum :	102 cm
Charge maximale	200 Kg	
Poids	Max. 130 Kg	
Classe Électrique	Classe I	
Sécurité	Marquage CE, classe 1 règle 12	