

INFORMATIONS DE COMMANDE

2533110 REHAB

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

42204	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 50 mm - (x 4)
42203	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 100 mm 2 snaps - (x 2)
601132L	Jeu de 4 câbles 2 fiches bananes 2 mm mâle
602048	Flacon de gel 250 ml
680055	Housse de transport
683010	Chargeur rapide
690001	Housse de protection
949000	Clip ceinture
941213	Batterie haute énergie
980026	Styler point moteur + flacon de gel 250 ml
6111944	Jeu d'adaptateurs Snap-fil

ACCESSOIRE EN OPTION

601131L	Jeu de 4 câbles Snap
---------	----------------------


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de canaux :	4
Courant constant :	Jusqu'à une résistance max de 1 300 Ohm/canal
Intensité maximale :	120 mA
Incréments :	0,25 mA
Largeur d'impulsion :	30 à 400 µ secondes
Fréquence :	1-150 Hz
Classe IP :	IP122
Applications :	Type BF conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batterie 941213 :	Nickel métal hydride (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h.
Dimensions L x W x H :	138 x 95 x 33 mm
Poids :	300 g batterie incluse

FORME D'ONDE



• Biphasée symétrique
100% compensée

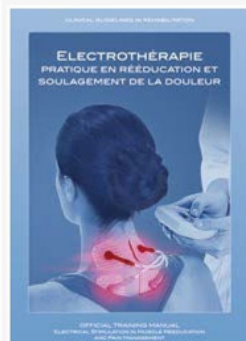

Livre Électrothérapie
Pratique en rééducation et
soulagement de la douleur
(Réf. : 000-00002872)



Télécharger le manuel
d'utilisation du
Rehab Chattanooga®

Le Rehab est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

2533110 Compex Pro Rehab



L'INCONTOURNABLE DE LA RÉÉDUCATION



- 4 CANAUX
- POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER PLUSIEURS GROUPES MUSCULAIRES SIMULTANÉMENT
- COMBINAISON DE PROGRAMMES
- PROGRAMMES : RÉHABILITATION I, ANTIDOULEUR I, VASCULAIRE, PRÉPARATION PHYSIQUE I

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™

Mi-Ready ce qui signifie que la technologie Muscle Intelligence™ est proposée sur les 4 canaux par l'appareil sous réserve de faire l'acquisition d'un ou plusieurs câbles Mi-Sensor.

2+2

Choisir et associer 2 programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter 2 zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des 2 programmes différents (ex. endorphinique + TENS).

SKIP

Permet de passer librement d'une phase à une autre (échauffement, travail/repos, récupération).

STYLET POINT MOTEUR

Associé au programme dédié, il permet de détecter les points moteurs vous indiquant précisément le positionnement optimal des électrodes.

PROGRAMMATION

Permet de créer ses propres programmes afin de personnaliser les paramètres.

AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2h30.

GARANTIE 3 ANS.

