

INFORMATIONS DE COMMANDE

2535110 **PHYSIO**

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

42204	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 50 mm - (x 4)
42203	Électrodes à Snap Dura-Stick® Plus Snap 50 x 100 mm 2 snaps - (x 2)
601132L	Jeu de 4 câbles 2 fiches bananes 2 mm mâle
602048	Flacon de gel 250 ml
642110	Électrodes galvaniques - (1 jeu)
6601160x4	Câbles Mi-Sensor - (x 4)
680054	Mallette de transport
680055	Housse de transport
683010	Chargeur rapide
690001	Housse de protection
949000	Clip ceinture
941213	Batterie haute énergie
980026	Styler point moteur + flacon de gel 250 ml
6111944	Jeu d'adaptateurs Snap-fil

ACCESSOIRES EN OPTION

601131L	Jeu de 4 câbles Snap
6601160	Câble Mi-Sensor (x 1)
114.610+	Sonde Vaginale Saint-Cloud® Plus 2 fiches bananes
114.242+	Sonde anale Saint-Cloud® 2 fiches bananes 2 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de canaux :	4
Courant constant :	Jusqu'à une résistance max de 1 300 Ohm/canal
Intensité maximale :	120 mA
Incréments :	0,25 mA
Largeur d'impulsion :	30 à 1 000 µ secondes
Fréquence :	1-150 Hz
Classe IP :	IP122
Applications :	Type BF conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batterie 941213 :	Nickel métal hydride (NiMH) 4,8 V 2000 mA/h.
Dimensions L x W x H :	138 x 95 x 33 mm
Poids :	300 g batterie incluse


FORMES D'ONDES



- Biphasée symétrique 100% compensée



- Courant direct pulsé (œdème)

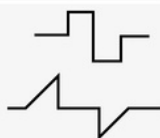

- **Biphasée compensée à longue largeur d'impulsion**
- Rectangulaire (dénervation totale)
- Triangulaire (dénervation partielle)

..... Galvanisée/Directe




Télécharger le manuel d'utilisation du Physio Chattanooga®

Le Physio est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

2535110 Compex Pro Physio



LA POLYVALENCE EN ÉLECTROTHÉRAPIE

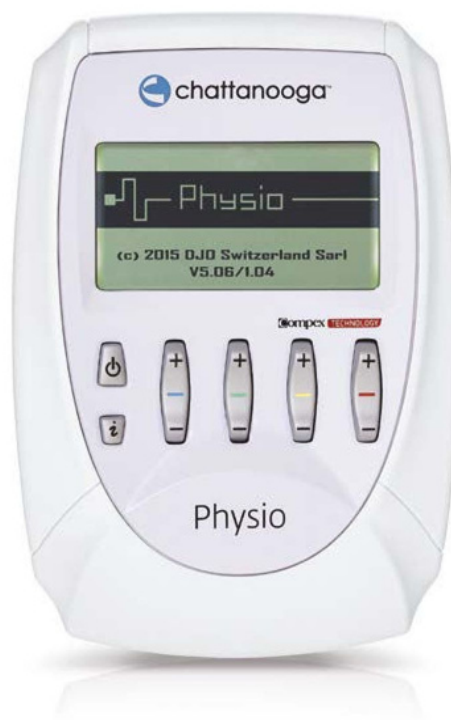

- 4 CANAUX POLYVALENTS
- PROGRAMMES : RÉHABILITATION I & II, ANTIDOULEUR I & II, VASCULAIRE, PRÉPARATION PHYSIQUE I & II, NEUROLOGIE, INCONTINENCE, MUSCLES DÉNÉRVÉS, COURANT DIRECT
- HYPERHIDROSE, UROLOGIE*, PRÉVENTION DES ŒDÈMES POST-TRAUMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™
4 fonctions sur les 4 canaux Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. 4 câbles Mi-Sensor inclus.

2+2

Choisir et associer 2 programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter 2 zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des 2 programmes différents (ex. endorphinique + Tens).

FONCTION TRIGGER

Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation lorsque ceci est requis dans certains protocoles (dorsiflexion du pied de l'hémiplégique, etc.).

*Biofeedback non disponible sur ce dispositif.



RECHERCHE DE PENTE AUTOMATIQUE POUR DÉNÉRVATION PARTIELLE

Physio est l'unique appareil du marché proposant une recherche de pente automatique lorsqu'une dénérvation partielle est traitée permettant la mise en place d'un protocole simple afin de prévenir l'atrophie et limiter la sclérose.

AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2h30.

GARANTIE 3 ANS.

